




“세정건조 시스템,”

감염예방 + 장애인/노인 자립지원

이런분들에게 추천합니다!

- 복지용구소독대행업체, 복지용구사업소
- 노인복지관, 요양원, 요양병원
- 장애인종합복지관, 장애인체육관, 장애인자활센터 등

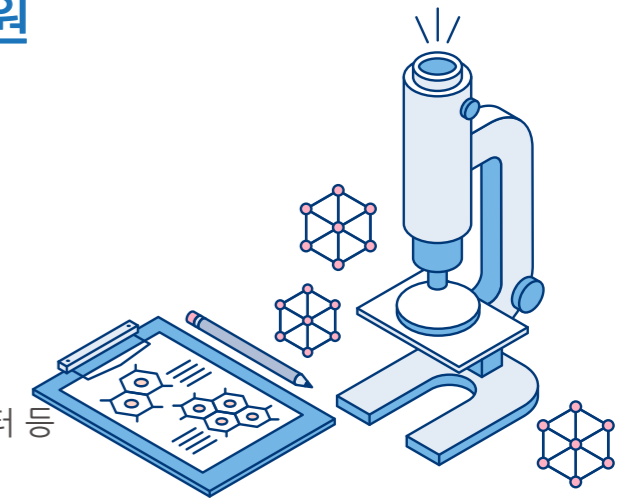

세정건조 시스템이란?

- 일본 복지용구 소독세정기 업계 1위 제품으로 내구성이 뛰어납니다.
- 우수하고 균일한 품질의 소독서비스 제공이 가능합니다.
- 시간 및 인력 감소에 도움이 되어 효율적 입니다.
- 복지용품 뿐 만 아니라 토탈케어, 소독대행 등 다양한 사업을 전개하실 수 있습니다.

오존수와 고온·고압수를 동시에 사용

“다목적 세정기 OE-3,”

Ozone water disinfection / High pressure & high temperature water washing machine




고온 + 고압수로 찌든때 제거

78ℓ대용량 온수탱크, 최대 80℃ 고온수를 7MPa 압력으로 연속 분사하여 눌러붙은 찌든때를 제거합니다.



인체에 안전한 오존수 제공

오존수는 약품 성분이 전혀 없는 친환경 제균제입니다. 오존수의 성분은 물과 산소 뿐으로, 제균작용 후 산소로 되돌아가 유해 잔류물을 남기지 않습니다. 피부 반응, 알러지 등 2차 질병을 예방합니다.

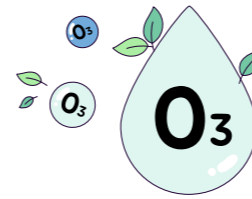

전기방식으로 배기가스 걱정 無

OE-3는 기름이 필요없는 전기방식입니다. 배기가스 배출과 관련한 걱정이 없어 실내에서 사용 하기에 좋습니다.



바닥 미끄러움 제거 기능

세척 작업후 세척장의 바닥에 오존수를 도포하면, 바닥의 미끄러움이 제거되어 작업장을 청결하게 유지하실 수 있습니다.



다양한 용품 세정 가능

용품 및 기기 세정에 최적화 된 적정 수압으로, 요양용 침대, 매트리스, 휠체어, 보행기, 이동변기 등 모든 제품에 사용 가능합니다.



80℃의 고온 + 7KPa 고압수로 찌든 때를 한번에!
오존수로 살균·탈취까지 동시에!

● 제품사양

모델명	OE-3	수온	MAX80℃
치수	W 625 X L 775 X H 1,132mm	온수탱크 용량	78ℓ
중량	130kg	구성품	세정 건 / 세정호스(5m)
전원	3상 200~220V 30A	오존수 분출량	80~90 ℓ/H
세정수 분출량	500 ℓ / H	오존수 분출 압력	0.2MPa전후
세정수 분출압	3~7MPa (조절 가능)	오존수 구성품	오존 건 / 오존호스(5m)